

BioCor: Manuale

Dispositivo per la correzione del campo energetico umano usando informazioni ricavate dalle dita attraverso lo strumento EPI Bio-Well. Questi risultati possono essere d'aiuto nel miglioramento dello stile di vita. BioCor usa Frequenze Estremamente Alte (EHF) nella banda dei gigahertz (4.9 mm (60.12 GHz), 5.6 mm (53.53 GHz) e 7.1 mm (42.19 GHz) di intensità estremamente bassa (meno di 10 mW/cm²).

BioCor è del tutto sicuro per qualunque tipo di paziente di qualsiasi età.

Utilizzo consigliato: una volta al giorno, preferibilmente prima di dormire.



- 1 - pulsante ON ;
- 2 - luci;
- 3 - input del segnale audio;
- 4 - connessione USB per elettrodo per l'acqua;
- 5 - connessione per le cuffie (connettore DJK, jack rosso);
- 6 - connessione per le cuffie (jack verde).

Fig.1. Dispositivo BioCor.

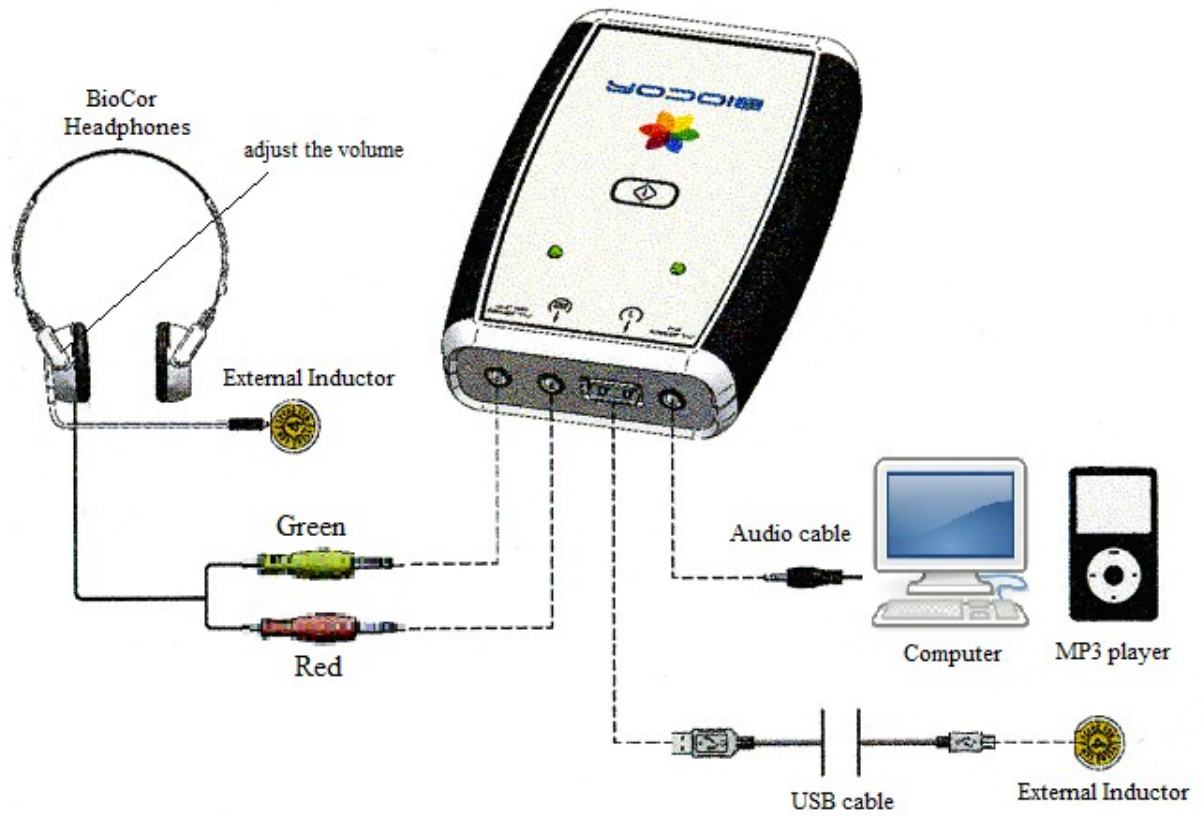


Fig. 2. Connessioni del BioCor



Fig. 3. Elettrodo per l'acqua con induttore esterno

Istruzioni operative

1. Create un file audio usando il dispositivo Bio-Well e salvatelo sul computer.
2. Scaricate il file audio su un cellulare o un riproduttore, oppure usate il vostro computer come fonte audio.
3. Collegate BioCor, computer (o altra fonte audio) e cuffie come mostrato in fig. 1, 2.
4. Collegate l'Induttore Esterno (rotondo, giallo) all'asta microfono delle cuffie.
5. Mettete le cuffie appoggiando l'asticella microfono sull'area della tempia.
6. Riproducete il file audio generato dal programma Bio-Well.
7. Premete il pulsante ON sul dispositivo BioCor (fig.1).
8. Quando il file audio è acceso le lucine lampeggiano.
9. Adattare il volume alle esigenze individuali. Se il volume è troppo basso, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
10. Quando il file audio è terminato il BioCor si spegnerà automaticamente.

Regimi del BioCor

Canale	Frequenza (Hz)	Numero di cicli consecutivi	Tempo di fase attiva (sec.)	Tempo di fase passiva (sec.)
1	1.8+4.0+7.7+8.2+9.2	1	300	0
2	4.9+5.5+7.8+9.5	3	60	60



Il BioCor si accenderà solo se:

- almeno un induttore (rotondo, giallo) è collegato;
- premete il pulsante ON.

NB! L'influsso delle Frequenze Estremamente Alte sarà attivo solo se la melodia musicale viene riprodotta .

Regimi dei Canali:

Canale 1 (induttore addizionale): funziona per 5 minuti (EHF vengono emesse) e poi si spegne.

Canale 2 (induttore osulle cuffie): funziona a cicli - 1 minuto in regime attivo (emissione EHF), poi 1 minuto in regime passivo (no EHF). Questo ciclo viene ripetuto 3 volte.

BioCor si spegne automaticamente quando tutti questi regimi sono terminati o la melodia finisce. Quando finisce la melodia, BioCor si spegne in 2 secondi, non importa se uno qualunque dei regimi sia concluso o meno.

I LED verdi dovrebbero lampeggiare durante la fase Attiva.

Ogni LED è connesso solamente al proprio canale.

LED 1 - Canale 1.

LED 2 - Canale 2.

Durante la fase Passiva del Canale, il LED corrispondente sarà sempre acceso (senza lampeggiare).

Se all'accensione del BioCor un induttore non è collegato a uno dei Canali, allora quel Canale non funzionerà. Se è connesso solo un induttore, funzionerà solo quell'induttore.

Per lavorare con entrambi i Canali dovete connettere entrambi gli induttori e poi accendere il BioCor.

Se durante il funzionamento del dispositivo uno degli induttori si sconnette, il LED corrispondente smetterà di lampeggiare. Non



appena la connessione viene ripristinata il LED riprenderà a lampeggiare.



I benefici del BioCor

BioCor è una combinazione di musica e guarigione con frequenze basata sulla vostra personale frequenza e una speciale musica curativa. Il primo file musicale è stato registrato in Tibet con 7 Campane Tibetane e poi modificato in base alla vostra frequenza misurata tramite il Bio-Well. Nel corso di 10 minuti la musica lentamente si trasforma nel più positivo suono di guarigione. Altri 7 file musicali corrispondenti ai 7 Chakra sono stati composti da Kimba Arem, del Colorado, USA. In queste composizioni Kimba usa il principio dell'effetto binaurale.

I battiti binaurali, o toni binaurali, sono degli artefatti di elaborazione uditiva, o suoni apparenti, causati da specifici stimoli fisici. Questo effetto fu scoperto nel 1839 da Heinrich Wilhelm Dove e guadagnò grande popolarità alla fine del XX secolo grazie al fatto che i risultati dei battiti binaurali aiutavano a indurre rilassamento, meditazione, creatività e altri desiderabili stati mentali. L'effetto sulle onde cerebrali dipende dalla differenza in frequenze per ciascun tono: ad esempio, se in un orecchio si fanno suonare 300 Hz e nell'altro 310 Hz, allora il battito binaurale ha una frequenza di 10 Hz.

Quando due toni a frequenze leggermente diverse vengono fatti ascoltare separatamente, uno per ciascun orecchio di un soggetto, utilizzando delle cuffie stereo, il cervello produce un fenomeno che risulta in pulsazioni a bassa frequenza in ampiezza e localizzazione sonora di un suono percepito. Si percepirà un tono battente, come se i due toni si fossero naturalmente mixati, dal cervello. Le frequenze dei toni devono essere inferiori a 1,000 hertz perchè il battito si possa notare. La differenza fra le due frequenze deve



essere piccola (inferiore o pari a 30 Hz) perché l'effetto si verifichi; altrimenti i due toni verranno sentiti separatamente e non si percepirà alcun battito. I battiti binaurali sono di interesse per i neurofisiologi che indagano il senso dell'udito. Secondo le testimonianze, i battiti binaurali influenzano il cervello in modo più sottile attraverso il trascinarsi (entrainment, ndt.) delle onde cerebrali, ed è stato riportato che riducono l'ansietà e offrono altri benefici salutari come il controllo sul dolore.

Ecco le informazioni binaurali per ogni traccia musicale:

1° chakra: 8 Hz alpha

2° chakra: 7.8 Hz alpha basse

3° chakra: 4 Hz theta basse

4° chakra: 5 Hz theta, che vanno verso 3 Hz delta

5° chakra: 5 Hz theta

6° chakra: 3 Hz delta

7° chakra: 8 Hz alpha, che vanno verso 5 Hz theta

Il dispositivo BioCor genera Frequenze Estremamente Alte (EHF) nella banda millimeter gigahertz con un'intensità molto bassa modulata dalla musica del Bio-Well music.

Ampiamente utilizzata nei paesi dell'ex Unione Sovietica, la radiazione elettromagnetica a bassa intensità (di solito 10 mW/cm² o inferiore) di frequenze estremamente alte (soprattutto nell'ordine di 40 - 70 GHz, che corrisponde alla lunghezza d'onda di 7.5 - 4.3 mm) viene usata nella medicina umana per il trattamento di molti tipi di malattie. Questo tipo di terapia si chiama Terapia a Onda Millimetrica (Millimeter Wave Therapy - MMW) o Terapia a Frequenze Estremamente Alte (Extremely High Frequency (EHF) Therapy). Più di 10.000 dispositivi vengono usati in tutto il mondo e più di un milione di persone sono state trattate con successo con la




Terapia a Onda Millimetrica nel corso della sua storia documentata. Istituita ne 1992, la rivista russa *Onde millimetriche in biologia e medicina* è tratta la base scientifica e le applicazioni cliniche della Terapia a Onda Millimetrica. Più di 50 numeri sono stati pubblicati.

L'influsso BioCor è un metodo che utilizza musica e frequenze per migliorare la salute. Viene utilizzato per promuovere la salute mentale ed emotiva; può inoltre aiutare a migliorare la qualità della vita di persone che devono far fronte a condizioni di salute fisica. I benefici includono il sollievo da stress o ansietà, il miglioramento dell'umore e l'accrescimento della qualità della vita.

Non è necessario che le persone abbiano abilità musicali per trarre beneficio dalla terapia musicale.

La ricerca mostra che la terapia con il BioCor può aiutare ad alleviare stress e ansietà, a combattere la depressione. I risultati mostrano che ascoltare la musica con le induzioni del BioCor ha un effetto benefico sulla pressione sanguigna, sul ritmo cardiaco e respiratorio. La terapia con il BioCor influenza direttamente la struttura cellulare e armonizza lo stato funzionale del corpo. Come dimostrato da una vasta ricerca condotta in Russia, 10 minuti di trattamento di notte contribuiscono enormemente al benessere della persona.

Dopo una sessione potete ripetere le misurazioni con il Bio-Well per vedere gli effetti del BioCor e creare un nuovo file musicale.

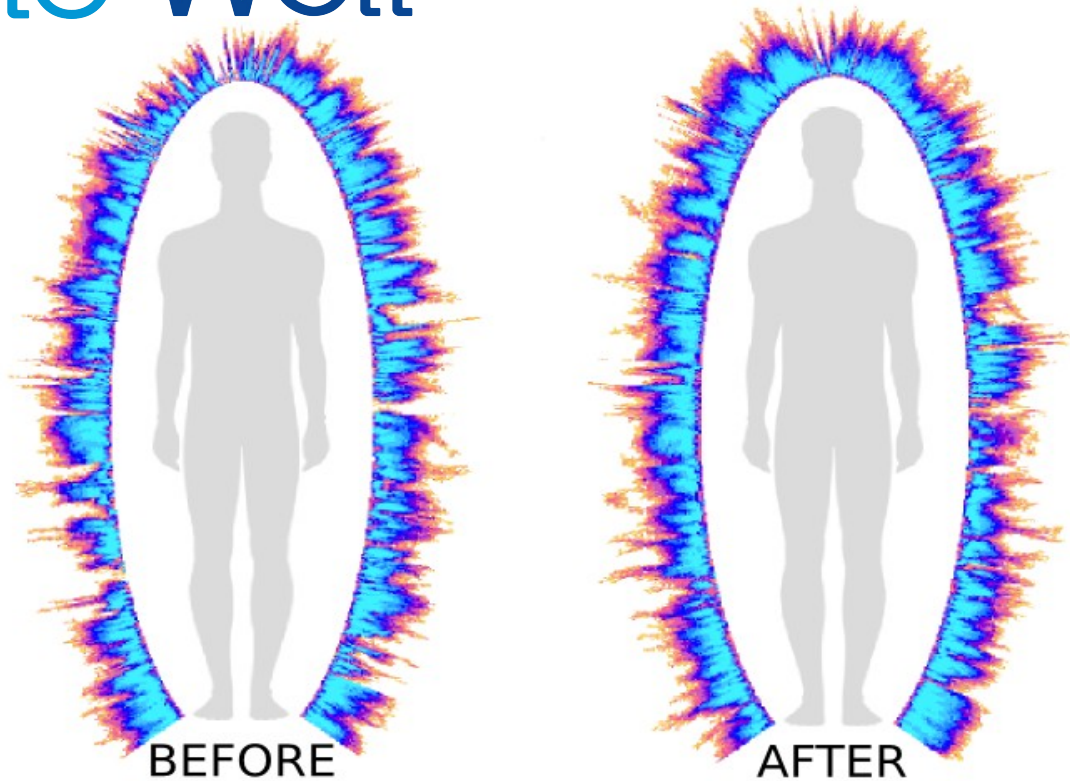

Un esempio di campo energetico umano prima e dopo aver usato la correzione con il BioCor.

***Disclaimer: BioCor non è un dispositivo medico;
il suo utilizzo non va inteso come trattamento,
ma solo come un influsso sul campo energetico della
persona
allo scopo di ridurre lo stress.***